

Active®

by

ACCESS™



www.active-walker.com

Active walker - user manual

Active

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Inhoud | 6. Montage en vervoer |
| 2. Inleiding | 7. Persoonlijke veiligheid |
| 3. Beschrijving onderdelen | 8. Werking |
| 4. Onderhoud | 9. Specificaties |
| 5. Instellingen voor comfort | 10. Accessoires |

De Active rollator verenigt de beste gebruiksvriendelijke eigenschappen in een modern en slank ontwerp. De rollator is bedoeld om de gebruiker te helpen bij een aantal dagelijkse taken zoals lopen en winkelen.

De Active is geschikt voor dagelijks gebruik, zowel binnen als buiten.

De rollator heeft extra grote voorwielen, zodat obstakels zoals drempels en stoepanden gemakkelijk kunnen worden gepasseerd.

Active rollators voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dragen het CE-keurmerk voor medische apparaten. De Active rollator naar Scandinavisch ontwerp is sterk, ziet er fraai uit en is voordelig in aanschaf en gebruik – een betrouwbare metgezel die uitkomst biedt bij speciale mobiliteitsbehoeften.



VIER

ONDERHOUD

- Gebruik de rollator alleen om te lopen.
- Houd de rollator goed schoon met een doek of spons en een niet bijtend schoonmaakmiddel of gebruik een hogedrukreiniger of tuinslang.
- Controleer de bewegende delen (bijvoorbeeld de wielen en de hendels voor de hoogte-instelling) regelmatig.
- Controleer of de via de hendel te gebruiken kabelremmen goed zijn ingesteld (zie het onderdeel WERKING).
- Controleer regelmatig of schroeven, moeren en bouten nog goed vastzitten.
- Ga voor reparatie of onderhoud van uw Active rollator uitsluitend naar een erkende dealer.



Hendel voor het aanpassen van de handvathoogte

Om de handvathoogte van de rollator aan te passen, trekt u de hendel voor het aanpassen van de handvathoogte uit en stelt u de gewenste hoogte in. Zodra het handvat de juiste hoogte heeft, laat u de hendel los en duwt u het handvat naar beneden totdat het wordt vergrendeld. Doe hetzelfde met het andere handvat.



Hendel voor het aanpassen van de hoogte van de zitting

Om de hoogte van de zitting aan te passen, trekt u de beide hendels uit en stelt u tegelijkertijd de gewenste hoogte van de zitting in. Laat de hendels los om de zitting te vergrendelen. Duw voordat u gaat zitten op de zitting om te controleren of deze goed vastzit.



- De Active rollator wordt volledig gemonteerd en gebruiksklaar geleverd. U hebt geen gereedschap nodig.
- Om de Active in te klappen voor vervoer of opslag, trekt u de inklaphendel omhoog en draait u deze net zo lang rond totdat deze is vergrendeld. De Active dient er dan uit te zien zoals op de foto links.
- Om de Active uit te klappen voor gebruik, draait u de inklaphendel naar beneden totdat deze niet verder kan.
- Wees voorzichtig als u de rollator in of uit een kofferbak tilt.



- Voor uw eigen gezondheid en comfort is het belangrijk dat u op uw houding let en dat u de rollator zo vasthoudt dat u gemakkelijk de remmen kunt gebruiken.
- Stal de rollator in een veilige omgeving.
- Klap de rollator voor gebruik helemaal uit en vergrendel deze stand.
- Controleer voor gebruik of de wielen stabiel zijn en de grond raken.
- Kijk voor gebruik of de remmen goed zijn ingesteld en controleer de weking.
- Controleer voor gebruik of de zitting is vergrendeld.
- Neem altijd plaats op het midden van de zitting. De gebruiker moet de voeten op de grond kunnen zetten. Als dat niet kan, verstel dan de zitting.
- Zorg ervoor dat de rollator op de handrem staat voordat u gaat zitten.
- Ga niet op de rollator zitten als deze is ingeklapt.
- Ga niet op de rollator staan. Gebruik de rollator niet als trapje.
- Loop niet met de rollator terwijl er iemand anders opzit.
- Wees voorzichtig met het optillen en dragen van de rollator.

ACHT

WERKING

**Draagtas.**

Als u de zitting optilt, kunt u bij de draagtas. U kunt de tas loshalen om boodschappen of andere spullen mee te nemen.

**Obstakels.**

De rollator heeft extra grote voorwielen en een voetpedaal om grote obstakels zoals stoepranden te passeren. Druk met uw voet het voetpedaal naar beneden en druk tegelijkertijd de handvatten naar beneden om de voorwielen op te tillen en het obstakel te passeren.


Remmen.

De remmen zijn een belangrijk, speciaal ontworpen onderdeel van uw Active rollator. De remkabels zijn weggewerkt. Het gepatenteerde systeem is veiliger en vereist minder onderhoud dan andere oplossingen.

Om te remmen, knijpt u in de remhendel. U hoeft niet hard te knijpen en de remweerstand kan gemakkelijk worden ingesteld.

Om de remmen te vergrendelen en de rollator op de handrem te zetten, duwt u de remhendel naar beneden totdat deze is vergrendeld.

Om de remmen te ontgrendelen, trekt u de remhendel omhoog. De hendel klikt automatisch terug in de neutrale positie.

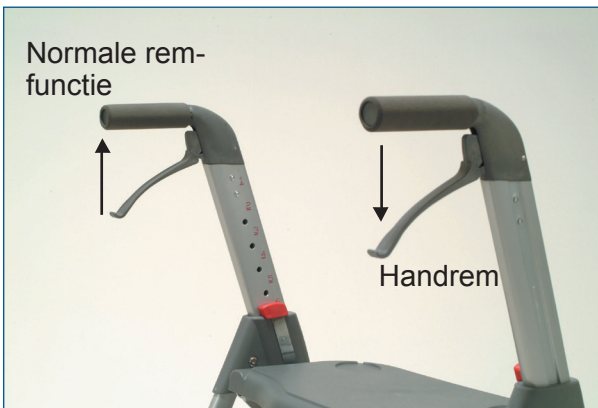

Onderhoud van de remmen.

Controleer de afstelling van de remmen voordat u de Active rollator gebruikt. De werking van de remmen moet periodiek worden gecontroleerd, zodat ze bij normale slijtage door gebruik (ook van de wioldelen) optimaal blijven werken. In het profiel van de achterstang zit een handige inbussleutel (zie foto rechts) waarmee u de rem gemakkelijk kunt bijstellen. Verstel de schroef totdat de remarm 3 mm van de band is verwijderd. Als u de schroef vastdraait (naar rechts), zet u de remmen strakker. Als u de schroef losdraait (naar links), zet u de remarm losser.



NINE**SPECIFICATIES**

Type	Active
Max. gewicht gebruiker	125 kg
	79-100 cm
Formaat in cm (b x l x h)	60 x 72 cm
Ingeklapt formaat	60 x 50 x 89 cm
Hoogte zitting	50 x 63 cm
Gewicht	ca. 9 kg (20 lbs)
Materiaal	aluminium en vezelversterkte kunststof
Reinigen	schoonmaakmiddel of hogedrukreiniger

TIEN**ACCESSOIRES**

Afhankelijk van uw speciale behoeften kunt u zelf accessoires voor uw Active rollator uitkiezen. Neem contact op met uw dealer voor informatie over de prijs en beschikbaarheid van:

- Rugleuning – een zachte rugleuning die aan de zitting kan worden bevestigd
- Stok-/krukhouders – om een stok of kruk mee te nemen
- Extra tas – extra ruimte om spullen mee te nemen
- Dienblad - voor eten en drinken
- Zuurstoffeshouder – om zuurstofflessen mee te nemen, in verschillende formaten
- Wielvergrendeling – zorgt ervoor dat de voorwielen in de goede richting blijven staan
- Sleepremmen – instelbare weerstand op de achterwielen, zodat de rollator niet vanzelf weggrolt
- Ski's – voorwielski-adapters voor gebruik in de sneeuw (borgt de wielen)
- Zitkussens – voor de zitting en de rugleuning – in verschillende kleuren

Voor meer informatie over de Active walker, accessoires en lokale dealers, kijk op: www.active-walker.com